

Гликозиды *rhodiola rosea*

Объект: родиола розовая, спиртовой экстракт

Растворитель пробы: подвижная фаза

Объем пробы: 10 мкл

НФ: 250x4.6 Reprosil-Pur Basic C18 (5 μm)

ПФ: 17% ацетонитрила в 0.1% водн. НЗРО4

Объемная скорость: 2 мл/мин

Детектирование:


— 205 нм

— 270 нм

Объем кюветы детектора: 10 мкл

Температура: 25 °С

Давление: 130 атм

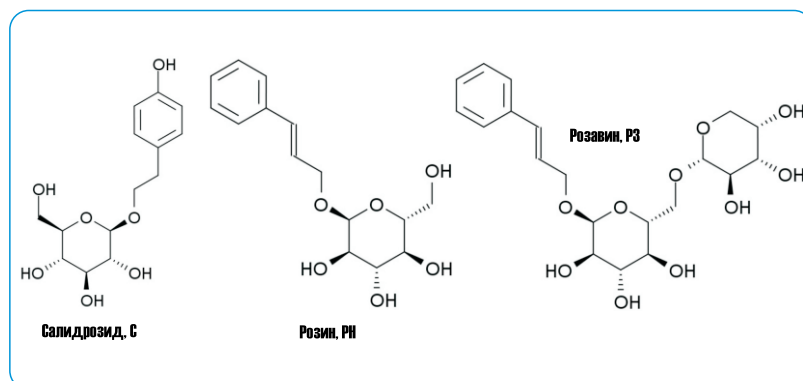

При поддержке компании



www.hplc.ru/training

<https://sites.google.com/site/scansychev/>
<http://www.chromforum.ru/>