

Антоцианины черники и клюквы

Объект:

— сок черники

— сок клюквы

Растворитель пробы: подвижная фаза

Объем пробы: 10 мкл

НФ: 50x4.6 Reprosil-Pur Basic C18 (1.9 μm)

ПФ: 12% ацетонитрила в 1% водн. НЭРО4


Объемная скорость: 2 мл/мин

Детектирование: 520 нм

Объем кюветы детектора: 10 мкл

Температура: 25 °С

Давление: 200 атм

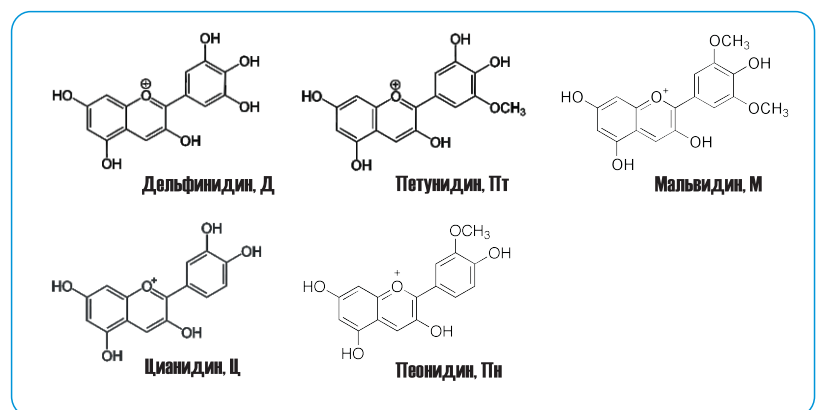

При поддержке компании



СКАН



www.hplc.ru/training

<https://sites.google.com/site/scansychev/>

<http://www.chromforum.ru/>